

NOTA TÉCNICA Nº 01/2013/LACEN/FSPH

CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS

EMENDA: Revoga a Nota de Nº 01/2012 e mantém a Orientação para Critérios para Aceitação e Rejeição de Amostras Biológicas.

Objetivo: Estabelecer critérios para aceitação e rejeição de amostras garantindo a qualidade e confiabilidade no processo pré-analítico.

O LACEN/SE divulga e estabelece, através desta nota técnica, os critérios para a aceitação e rejeição de amostras que devem ser adotados por todos os laboratórios e postos de coleta que encaminham amostras biológicas para essa instituição. Os critérios estabelecidos fazem parte da garantia da qualidade do processo pré-analítico, que uma vez seguido, favorecem a rastreabilidade, confiabilidade e credibilidade dos nossos resultados. Por isso o LACEN/SE estabelece um prazo de **30 dias** a partir da publicação desta Nota para adequação dos itens abaixo descritos.

1. CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS NO LACEN/SE

- As amostras enviadas ao LACEN/SE deverão vir acompanhadas da ficha do Gal, devidamente preenchida, seja ela impressa ou manuscrita, que servirá de requisição para o cadastro das amostras no sistema.
- A amostra biológica deve ter sido adequadamente rotulada, conservada e transportada.

2. IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA:

- Qualquer amostra deve vir identificada com etiqueta autocolante, em letra legível, contendo: nome do paciente completo, data de nascimento e o nome do Município/Unidade.

NOTA: A etiqueta deve ser colocada de maneira que se possa visualizar a amostra, não colocar a etiqueta na tampa. Se for amostra líquida (sangue total, soro, plasma) o nível da amostra não deve ficar coberto.

- As amostras para sorologia deverão ser encaminhadas em tubos de polipropileno para coleta de sangue à vácuo de tamanho 13 x 75 mm e volume de aspiração de 4 a 5 ml, contendo gel separador e ativador de coágulo, conforme descrito no Manual de Coleta.
- Amostras transportadas em **CAIXAS TÉRMICAS** com **GELO RECICLÁVEL**, e deverão ser entregues até às 15h de segunda à sexta.
- As amostras devem vir em tubo primário.

NOTA: Os laboratórios que não receberam o **MANUAL DE COLETA DO LACEN/SE** deverão acessá-lo no site www.lacen.se.gov.br.

3. CRITÉRIOS PARA REJEIÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS NO LACEN/SE

- Amostras sem identificação, sem requisição (ficha do GAL) ou sem a documentação exigida.
- Dados incorretos ou incompletos sobre o paciente, a amostra ou solicitação médica.
- Identificação errada ou duvidosa da amostra.
- Entrega da amostra fora do tempo viável para realização dos ensaios.
- Amostra inadequada (p.ex.: soro lipêmico, hemolisado).
- Volume de amostra insuficiente.
- Tubo quebrado ou com vazamento de amostra, ou ainda fora do tamanho solicitado, como também tubos reaproveitados.
- Amostras transportadas em caixas de Isopor, pois as mesmas devem vir em **CAIXAS TÉRMICAS**.
- Amostras sem centrifugação.

NOTA: As não conformidades com as amostras serão informadas via Protocolo de Devolução devolvida ao portador após a sua conferência pelo Responsável pelo recebimento de Amostras Biológicas no LACEN/SE.

Ressaltamos que a ficha do GAL substitui a requisição médica, pois nela contém todos os dados necessários para cadastro da amostra biológica.

Aracaju/SE, 19 de abril de 2013.



Erika Teles Dantas

Gerente de Recepção e Coleta

De acordo.

Aracaju/SE, 22 de abril de 2013.




Kariny Souza Pinheiro

Coordenadora Técnica

FSPH/LACEN/SE

Aprovo a Nota Técnica 01/2013/LACEN/FSPH.

Aracaju/SE, 22 de abril de 2013.

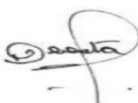

Danuza Duarte da Costa

Superintendente

FSPH/LACEN/SE